



HM-Sven Oppel  
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9  
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104 E-Mail: info@seniorenbett.org

Telefax: 04103-9654336 [www.seniorenbett.org](http://www.seniorenbett.org)

## Pflegebett „Inovia“



## Pflegebett „Inovia“ - Modell 50.5522.24

### > Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Stahl-Lamellen. Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar. Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne. Sichere Arbeitslast: 225 kg. Holzbau in Buche Dekor/Buche massiv. Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz.

Holzbau mit integrierten Seitengittern, Schutzhöhe ca. 45 cm für Matratzen bis 23 cm Höhe. Holzbau in innovativer/wohnlicher Optik, trotz 55 cm Höhenverstellbereich niedrige Holzhaube im Fußbereich. Linak-Antriebssystem mit 24 Volt-Antriebstechnik, spannungsführende 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes verlagert, selektiv sperrbarer Handschalter mit Einzelfunktions-Sperrungen

### > Bestell-Nummer

50.5522.24 Pflegebett „Inovia“  
19.1400.1 Aufrichter

### > Maße

Länge 225 cm  
Breite 104 cm

### > Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

Schaumlederbezug für Seitengitter  
Leselampen  
Serviertablett  
Bet Verlängerung  
Holzbau in Kirsche oder anderen Dekoren



# INOVIA - Das Pflegebett mit innovativen Ideen



Griffleiste aus Massivholz

225 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter Schutzhöhe von ca. 45 cm für Matratzen bis max. 23 cm




24 Volt-Antriebssystem mit selektiv-sperrbarem Handschalter

Trotz 55 cm Höhen-Verstellbereich niedrige Holzhaube im ansprechenden Wohndesign



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition

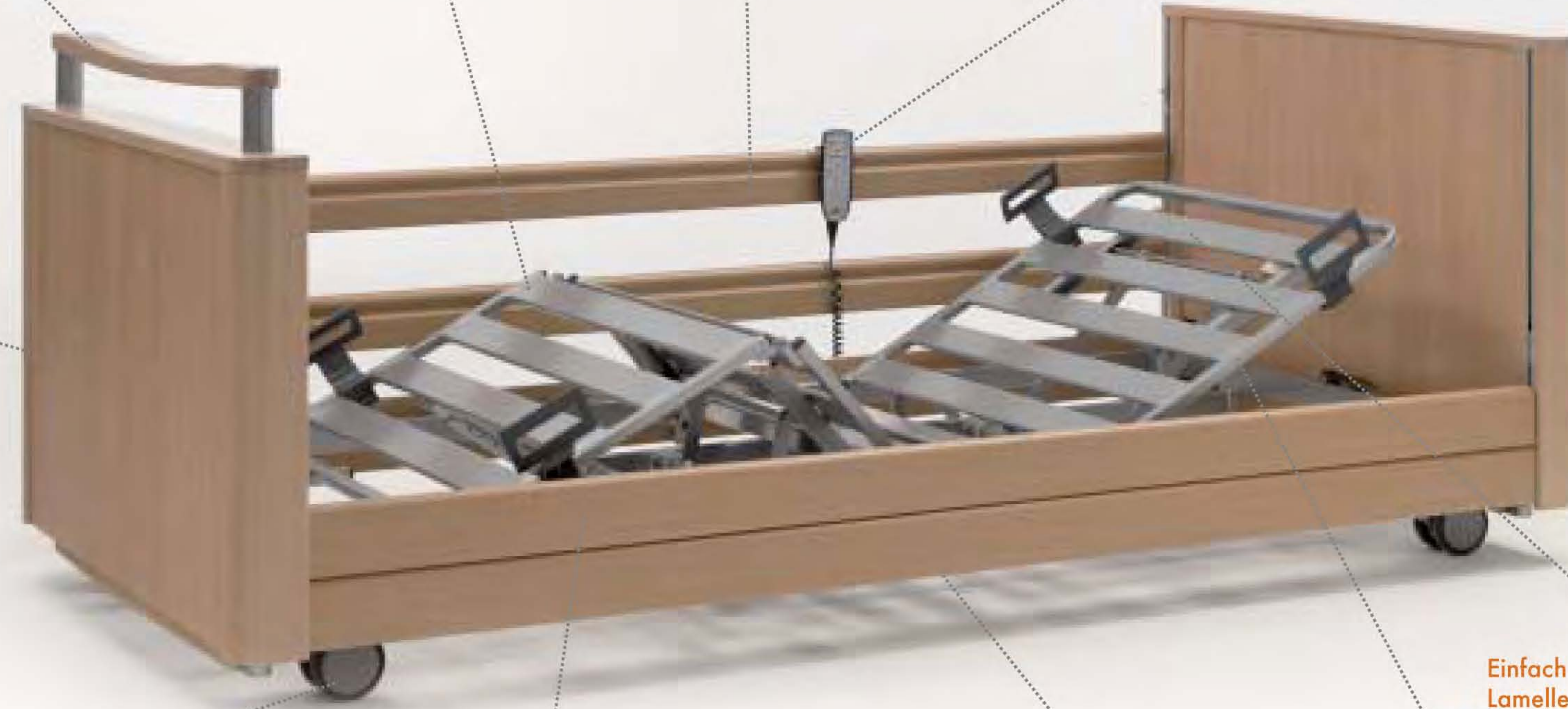

Fußtieflagerung



Unterschenkellehne manuell einstellbar

Einfach zu reinigende Liegeflächen-Lamellen

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern



auswandernde Rückenlehne



ergonomisch geformte Griffleiste



Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm, Verstellbereich = 55 cm

## Ihre Vorteile:

- **Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm**  
Der innovative Verstellbereich von 55 cm ermöglicht die Nutzung des Pflegebettes als ein Niedrig-Einstiegsbett oder als ein Standard-Pflegebett. Eine Unterscheidung nach der Nutzung ist nicht mehr erforderlich. Ein Bett für alle Fälle.

- **Wirtschaftlichkeit**  
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. INOVIA ist auch die wirtschaftliche Alternative zu hochpreisigen Niedrig-Einstiegsbetten im Markt.

- **24 Volt-Antriebssystem serienmäßig**  
Die Wartungsintervalle können auf 2 Jahre verlängert werden (s. Gebrauchsanweisung). Ableitstrommessung am Pflegebett dürfen entfallen. Bedingungen hierfür können bei Burmeier erfragt werden. Bewohner werden optimal geschützt, da alle spannungsführenden 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes liegen.

- **Sichere Arbeitslast von 225 kg**  
Auch für schwergewichtigere Personen geeignet
- **Seitengitterschutzhöhe ca. 45 cm**  
Matratzen und Dekubitussysteme bis 23 cm können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in den meisten Fällen.